

Datenblatt Varianten:

Sas240öf, Doppelaggregat mit 300l Behälter
Artikelnummer: 2Z 81 500

s·a·s
medizintechnik

Technische Daten:

Type: sas240öf

Betriebsüberdruck: 7 bar

Ansaugleistung: 480 l/min

Effektive Lieferleistung: 300 l/min

Verdichterstufen pro Aggregat: 1

Zylinder pro Aggregat: 1

Drehzahl: 1450 1/min

Nennleistung Aggregat: 2,2 kW

Motor Schutzart/Isolationsklasse: IP 54/F

Motor Effizienzklasse: EFF1

Betriebsspannung: 400/230Y~3/50 V/Hz

Schalldruckpegel: 78 dB(A) optional mit Schalldämmbox (siehe Datenblatt 2Z 81 550)

Abmessungen: 1750 mm x 600 mm x 1060 mm

Lieferumfang: Aggregat **sas240öf** aufgebaut auf einem 300l Behälter, Anschlussschlauch, Motorschutz, Schwingelemente, Sicherheitsventil und Druckschalter

Gewicht: 132 kg

Druckluftanschluss: G1/2"


Artikelnummer: 2Z 81 500

Beschreibung:

Die beiden Aggregate "sas240öf" sind aufgebaut auf einem 300l Behälter. Die direktgetriebenen Einzylinder sind Öl frei und luftgekühlt. Bei der Entwicklung wurde großer Wert auf eine niedrige Aggregatdrehzahl gelegt. Dies führt zu hohen Standzeiten aller Bauteile. Die Pleuel- und Kolbenbolzenlager sind als Wälzlager ausgeführt. Die Zylinderköpfe aus hochwertiger Aluminiumlegierung sorgen für effektive Kühlung. Die Wärme wird optimal abgeleitet durch große Lüfter Räder. Damit wird die lange Lebensdauer der Aggregate gewährleistet. Effiziente Nachkühler schaffen niedrige Druckluftaustrittstemperaturen.

Die Reinheit der zu verdichtenden Ansaugluft wird durch hochwertige Ansaugfilter gewährleistet.

Bedingt durch die geringe Eigenvibration des Aggregates, ist eine Aufstellung ohne Fundamente möglich.

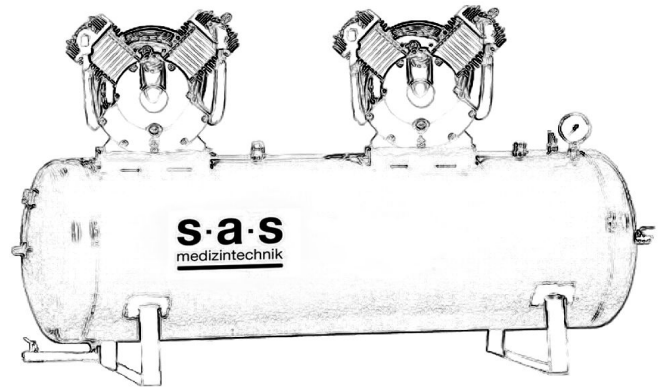

Datenblatt Varianten:

**sas240öf, Doppelaggregat mit 300l Behälter,
schallgedämmt**

Artikelnummer: 2Z 81 550

Technische Daten:

Type: sas240öf

Betriebsüberdruck: 7 bar

Ansaugleistung: 480 l/min

Effektive Lieferleistung: 300 l/min

Verdichterstufen pro Aggregat: 1

Zylinder pro Aggregat: 1

Drehzahl: 1450 1/min

Nennleistung Aggregat: 2,2 kW

Motor Schutzart/Isolationsklasse: IP 54/F

Motor Effizienzklasse: EFF1

Betriebsspannung: 400/230Y~3/50 V/HZ

Schalldruckpegel: 65 dB(A)

Abmessungen: 1750 mm x 690 mm x 1170 mm

Lieferumfang: 2 Stck. schallgedämmte Aggregate **sas240öf** aufgebaut auf einem 300l Behälter, Anschlussschlauch, Motorschutz, Schwingelemente, Sicherheitsventil und Druckschalter

Gewicht: 206 kg

Druckluftanschluss: G1/2"

Artikelnummer: 2Z 81 550

Beschreibung:

Die beiden schallgedämmten Aggregate "sas240öf" sind aufgebaut auf einem 300l Behälter. Die direktgetriebenen Einzylinder sind Öl frei und luftgekühlt. Bei der Entwicklung wurde großer Wert auf eine niedrige Aggregatdrehzahl gelegt. Dies führt zu hohen Standzeiten aller Bauteile. Die Pleuel- und Kolbenbolzenlager sind als Wälzlager ausgeführt. Die Zylinderköpfe aus hochwertiger Aluminiumlegierung sorgen für effektive Kühlung. Die Wärme wird optimal abgeleitet durch große Lüfter Räder. Damit wird die lange Lebensdauer der Aggregate gewährleistet. Effiziente Nachkühler schaffen niedrige Druckluftaustrittstemperaturen.

Die Reinheit der zu verdichtenden Ansaugluft wird durch hochwertige Ansaugfilter gewährleistet.

Bedingt durch die geringe Eigenvibration des Aggregates, ist eine Aufstellung ohne Fundamente möglich.

